


固相抽出 – シリカベース



C18 (ODS) : C18-エンドキャップ

高純度シリカにオクタデシル基を化学結合し、ダブルエンドキャッピング処理によりシラノール基の影響を抑えた無極性相互作用の吸着剤です。タンパク質やDNAなど生体試料の脱塩に。

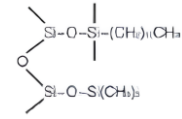

C% : 18-19% 平均粒子径 : 50 μ m 平均ポアサイズ : 60 \AA 表面積 : 600 m^2/g

品名	サイズ	order code	入数
WelChrom-C18	100mg/ 1mL	12340-13013	100
WelChrom-C18	200mg/ 3mL	12340-13024	50
WelChrom-C18	500mg/ 3mL	12340-13034	50
WelChrom-C18	1000mg/6mL	12340-13054	30
WelChrom-C18	2000mg/12mL	12340-13104	20
WelChrom-C18	5000mg/60mL	12340-13114	10

品名	サイズ	order code	入数
Sta-Sep-C18	100mg/ 1mL	12344-13013	100
Sta-Sep-C18	200mg/ 3mL	12344-13024	50
Sta-Sep-C18	500mg/ 3mL	12344-13034	50
Sta-Sep-C18	500mg/ 6mL	12344-13044	30
Sta-Sep-C18	1000mg/ 6mL	12344-13054	30


品名	サイズ	order code	入数
Cleanert-C18	100mg/ 1mL	12323-13013	100
Cleanert-C18	200mg/ 3mL	12323-13024	50
Cleanert-C18	500mg/ 3mL	12323-13034	50
Cleanert-C18	500mg/ 6mL	12323-13044	30
Cleanert-C18	1000mg/6mL	12323-13054	30
Cleanert-C18	2000mg/12mL	12323-13104	20
Cleanert-C18	5000mg/25mL	12323-13114	15

固相抽出 – シリカベース

Silica: シリカゲル

化学修飾していない高純度シリカを吸着剤としています。

極性相互作用を示し、極性化合物を保持するため、弱極性や非極性物質の分析に用います。

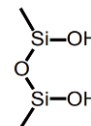

平均粒子径：50 μ m 平均ポアサイズ：60Å 表面積：480m²/g

品名	サイズ	order code	入数
WelChrom-Silica	100mg/ 1mL	12340-30013	100
WelChrom-Silica	200mg/ 3mL	12340-30024	50
WelChrom-Silica	500mg/ 3mL	12340-30034	50
WelChrom-Silica	500mg/ 6mL	12340-30044	30
WelChrom-Silica	1000mg/6mL	12340-30054	30


品名	サイズ	order code	入数
Sta-Sep-Silica	100mg/ 1mL	12344-30013	100
Sta-Sep-Silica	200mg/ 3mL	12344-30024	50
Sta-Sep-Silica	500mg/ 3mL	12344-30034	50
Sta-Sep-Silica	500mg/ 6mL	12344-30044	30
Sta-Sep-Silica	1000mg/ 6mL	12344-30054	30

品名	サイズ	order code	入数
Cleanert-Silica	100mg/ 1mL	12323-30013	100
Cleanert-Silica	200mg/ 3mL	12323-30024	50
Cleanert-Silica	500mg/ 3mL	12323-30034	50
Cleanert-Silica	500mg/ 6mL	12323-30044	30
Cleanert-Silica	1000mg/6mL	12323-30054	30
Cleanert-Silica	5000mg/25mL	12323-30114	15



SAX: 強陰イオン交換型

* Waters Sep-Pak Acell Plus QMA相当

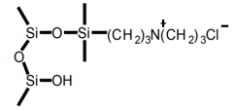

シリカゲルに第4級アミンを結合させた強陰イオン交換吸着剤。

水溶液問わず、弱酸性のマイナス電荷成分の抽出に。

C% : 9-10% 平均粒子径 : 50μm 平均ポアサイズ : 60Å 表面積 : 600m²/g イオン交換容量 : 0.5meq/g

品名	サイズ	order code	入数
WelChrom-SAX	100mg/ 1mL	12340-28013	100
WelChrom-SAX	200mg/ 3mL	12340-28024	50
WelChrom-SAX	500mg/ 6mL	12340-28044	30
WelChrom-SAX	1000mg/ 6mL	12340-28054	30

品名	サイズ	order code	入数
Sta-Sep-SAX	100mg/ 1mL	12344-28013	100
Sta-Sep-SAX	500mg/ 3mL	12344-28034	50
Sta-Sep-SAX	500mg/ 6mL	12344-28044	30
Sta-Sep-SAX	1000mg/ 6mL	12344-28054	30

品名	サイズ	order code	入数
Cleanert-SAX	100mg/ 1mL	12323-28013	100
Cleanert-SAX	200mg/ 3mL	12323-28024	50
Cleanert-SAX	500mg/ 3mL	12323-28034	50
Cleanert-SAX	500mg/ 6mL	12323-28044	30
Cleanert-SAX	1000mg/6mL	12323-28054	30

※その他の充填剤をお求めの方はお問い合わせください。

ラボラボカンパニー

